

# Лабораторная мебель ПРАКТИКА

## Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ekros.nt-rt.ru> | | эл. почта: [emc@nt-rt.ru](mailto:emc@nt-rt.ru)

# ПРАКТИКА

## ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ





## ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ



Стол� пристенные предназначены для организации рабочих мест лаборантов, размещения различных приборов и оборудования при проведении физических и химических исследований. В зависимости от потребности столы могут комплектоваться подвесными и подкатными тумбами, полками, электрикой, подводом воды и газа. Столы с подводом воды комплектуются сливными раковинами и 1 краном холодной воды.

Стандартно столы пристенные выпускаются высотой 750 мм (для работы сидя) и 900 мм (для работы стоя) с шириной столешницы 750 мм.

Выдерживают распределительную нагрузку на столешницу до 300 кг.

Стол� устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости. Поставляются в разобранном виде.

### Стол� пристенные

| КОД                                  | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В) | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Стол� пристенные 960×750×750</b>  |                                           |                              |                  |
| 56.0396.01.14                        | Стол пристенный ЛС                        | Ламинат                      | 27               |
| 56.0396.01.03                        | Стол пристенный КЕ                        | Керамика                     | 36               |
| 56.0396.01.08                        | Стол пристенный LG                        | Labgrade                     | 33               |
| <b>Стол� пристенные 960×750×900</b>  |                                           |                              |                  |
| 56.0396.11.14                        | Стол пристенный ЛС                        | Ламинат                      | 28               |
| 56.0396.11.03                        | Стол пристенный КЕ                        | Керамика                     | 37               |
| 56.0396.11.08                        | Стол пристенный LG                        | Labgrade                     | 34               |
| <b>Стол� пристенные 1200×750×750</b> |                                           |                              |                  |
| 56.0301.01.14                        | Стол пристенный ЛС                        | Ламинат                      | 34               |
| 56.0301.01.03                        | Стол пристенный КЕ                        | Керамика                     | 46               |
| 56.0301.01.08                        | Стол пристенный LG                        | Labgrade                     | 39               |
| 56.0301.01.02                        | Стол пристенный D                         | Durcon                       | 50               |
| 56.0301.01.12                        | Стол пристенный D с бортиком              | Durcon с бортиком            | 51               |
| <b>Стол� пристенные 1200×750×900</b> |                                           |                              |                  |
| 56.0301.11.14                        | Стол пристенный ЛС                        | Ламинат                      | 35               |
| 56.0301.11.03                        | Стол пристенный КЕ                        | Керамика                     | 47               |
| 56.0301.11.08                        | Стол пристенный LG                        | Labgrade                     | 40               |
| 56.0301.11.02                        | Стол пристенный D                         | Durcon                       | 51               |
| 56.0301.11.12                        | Стол пристенный D с бортиком 1200×763×900 | Durcon с бортиком            | 52               |

## ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ



× - краны TOF устанавливаются отдельно по дополнительному требованию  
Т - кран TOF

### Стол�ы пристенные

| КОД                                                   | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)    | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Стол�ы пристенные 1500×750×750</b>                 |                                              |                              |                  |
| 56.0255.01.14                                         | Стол пристенный ЛС                           | Ламинат                      | 38               |
| 56.0255.01.03                                         | Стол пристенный КЕ                           | Керамика                     | 53               |
| 56.0255.01.08                                         | Стол пристенный LG                           | Labgrade                     | 47               |
| 56.0255.01.02                                         | Стол пристенный D                            | Durcon                       | 56               |
| 56.0255.01.12                                         | Стол пристенный D с бортиком                 | Durcon с бортиком            | 57               |
| <b>Стол�ы пристенные 1500×750×900</b>                 |                                              |                              |                  |
| 56.0255.11.04                                         | Стол пристенный ЛС                           | Ламинат                      | 39               |
| 56.0255.11.03                                         | Стол пристенный КЕ                           | Керамика                     | 54               |
| 56.0255.11.08                                         | Стол пристенный LG                           | Labgrade                     | 48               |
| 56.0255.11.02                                         | Стол пристенный D                            | Durcon                       | 57               |
| 56.0255.11.12                                         | Стол пристенный D с бортиком                 | Durcon с бортиком            | 58               |
| <b>Стол�ы пристенные с подводом воды 1200×750×900</b> |                                              |                              |                  |
| 56.0301.12.03×                                        | Стол пристенный с подводом воды КЕ           | Керамика                     | 50               |
| 56.0301.12.08×                                        | Стол пристенный с подводом воды LG           | Labgrade                     | 43               |
| 56.0301.12.02Т                                        | Стол пристенный с подводом воды D            | Durcon                       | 53               |
| 56.0301.12.12Т                                        | Стол пристенный с подводом воды D с бортиком | Durcon с бортиком            | 54               |
| <b>Стол�ы пристенные с подводом воды 1500×750×900</b> |                                              |                              |                  |
| 56.0255.12.03×                                        | Стол пристенный с подводом воды КЕ           | Керамика                     | 57               |
| 56.0255.12.08×                                        | Стол пристенный с подводом воды LG           | Labgrade                     | 51               |
| 56.0255.12.02Т                                        | Стол пристенный с подводом воды D            | Durcon                       | 60               |
| 56.0255.12.12Т                                        | Стол пристенный с подводом воды D с бортиком | Durcon с бортиком            | 61               |



## ПОЛКИ К СТОЛАМ ПРИСТЕННЫМ

Полки предназначены для увеличения рабочей поверхности столов пристенных и размещения на них дополнительного оборудования.

Дополнительно нижние полки могут быть укомплектованы комплектом электрики со светильником. Поставляются в разобранном виде.



## Полки к столам пристенным

| КОД                                                             | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)               | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Полка нижняя для стола пристенного</b>                       |                                                         |                              |                  |
| 56.0295.11.14                                                   | Полка нижняя 1200×310×460 J1C                           | Ламинат                      | 11               |
| 56.0295.11.08                                                   | Полка нижняя 1200×310×460 LG                            | Labgrade                     | 17               |
| 56.0295.01.14                                                   | Полка нижняя 1500×310×460 J1C                           | Ламинат                      | 12               |
| 56.0295.01.08                                                   | Полка нижняя 1500×310×460 LG                            | Labgrade                     | 19               |
| <b>Полка двухуровневая для стола пристенного</b>                |                                                         |                              |                  |
| 56.0311.11.14                                                   | Полка 2-х уровневая 1200×450×850 ЛС                     | Ламинат                      | 24               |
| 56.0311.11.08                                                   | Полка 2-х уровневая 1200×450×850 LG                     | Labgrade                     | 32               |
| 56.0311.01.14                                                   | Полка 2-х уровневая 1500×450×850 ЛС                     | Ламинат                      | 27               |
| 56.0311.01.08                                                   | Полка 2-х уровневая 1500×450×850 LG                     | Labgrade                     | 43               |
| <b>Электрика, подвод воды в комплекте для стола пристенного</b> |                                                         |                              |                  |
| BCO 001                                                         | Автомат откл. питания, 4 эл. розетки                    |                              |                  |
| BCO 002                                                         | Автомат откл. питания, 4 эл. розетки, светильник 18 Вт. |                              |                  |



BCO 001



BCO 002

\* По специальному заказу полка может быть укомплектована комплектом электрики BCO 001 или BCO 002

## ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ



Столешницы предназначены для организации рабочих мест лаборантов и размещения различных приборов и оборудования при проведении физических и химических исследований в лабораториях большой площади. Столы располагаются в центре помещения для обеспечения к ним свободного доступа со всех сторон.


Объединение столов в единый комплекс обеспечивается особой конструкцией каждой включаемой в него единицы. В зависимости от потребности, входящие в комплекс столы могут комплектоваться подвесными и подкатными тумбами, полками, электрикой, подводом воды и газа. Столы с подводом воды комплектуются сливными раковинами и краном холодной воды.

Стандартно столы лабораторные островные серии Практика выпускаются высотой 750 мм (для работы сидя) и 900 мм (для работы стоя).

Выдерживают распределительную нагрузку на столешницу до 300 кг.

Столешницы устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости.

## Столешницы островные

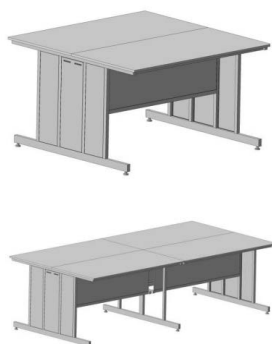

| КОД                                       | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В) | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Столешницы островные 1200×1500×900</b> |                                           |                              |                  |
| 56.0388.12.14                             | Стол островной ЛС                         | Ламинат                      | 56               |
| 56.0388.12.03                             | Стол островной КЕ                         | Керамика                     | 98               |
| 56.0388.12.08                             | Стол островной LG                         | Labgrade                     | 84               |
| 56.0388.12.02                             | Стол островной D                          | Durcon                       | 102              |
| 56.0388.12.12                             | Стол островной D с бортиком               | Durcon с бортиком            | 104              |
| <b>Столешницы островные 1500×1500×900</b> |                                           |                              |                  |
| 56.0388.22.14                             | Стол островной ЛС                         | Ламинат                      | 82               |
| 56.0388.22.03                             | Стол островной КЕ                         | Керамика                     | 112              |
| 56.0388.22.08                             | Стол островной LG                         | Labgrade                     | 100              |
| 56.0388.22.02                             | Стол островной D                          | Durcon                       | 116              |
| 56.0388.22.12                             | Стол островной D с бортиком               | Durcon с бортиком            | 118              |
| <b>Столешницы островные 2400×1500×900</b> |                                           |                              |                  |
| 56.0389.12.14                             | Стол островной ЛС                         | Ламинат                      | 94               |
| 56.0389.12.03                             | Стол островной КЕ                         | Керамика                     | 178              |
| 56.0389.12.08                             | Стол островной LG                         | Labgrade                     | 150              |
| 56.0389.12.02                             | Стол островной D                          | Durcon                       | 186              |
| 56.0389.12.12                             | Стол островной D с бортиком               | Durcon                       | 190              |
| <b>Столешницы островные 3000×1500×900</b> |                                           |                              |                  |
| 56.0389.22.14                             | Стол островной ЛС                         | Ламинат                      | 146              |
| 56.0389.22.03                             | Стол островной КЕ                         | Керамика                     | 206              |
| 56.0389.22.08                             | Стол островной LG                         | Labgrade                     | 182              |
| 56.0389.22.02                             | Стол островной D                          | Durcon                       | 214              |
| 56.0389.22.12                             | Стол островной D с бортиком               | Durcon                       | 218              |



ЛАБОРАТОРНАЯ  
МЕБЕЛЬ СЕРИИ  
«ПРАКТИКА»

ПРАКТИКА®

## ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ



BCO 001





BCO 002

\* По специальному заказу  
полка может быть  
укомплектована  
комплектom электрики  
BCO 001 или BCO 002

## Столешницы островные

| КОД                                                          | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В) | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Столешницы островные 1200×1500×900 один комплект воды</b> |                                           |                              |                  |
| 56.0394.11.03                                                | Стол островной KE                         | Керамика                     | 104              |
| 56.0394.11.08                                                | Стол островной LG                         | Labgrade                     | 90               |
| 56.0394.11.02T                                               | Стол островной D кран tof                 | Durcon                       | 108              |
| 56.0394.11.12T                                               | Стол островной D с бортиком кран tof      | Durcon с бортиком            | 110              |
| <b>Столешницы островные 1500×1500×900 один комплект воды</b> |                                           |                              |                  |
| 56.0394.21.03                                                | Стол островной KE                         | Керамика                     | 118              |
| 56.0394.21.08                                                | Стол островной LG                         | Labgrade                     | 106              |
| 56.0394.21.02T                                               | Стол островной D кран tof                 | Durcon                       | 122              |
| 56.0394.21.12T                                               | Стол островной D с бортиком кран tof      | Durcon с бортиком            | 125              |
| <b>Столешницы островные 1200×1500×900 два комплекта воды</b> |                                           |                              |                  |
| 56.0394.12.03                                                | Стол островной KE                         | Керамика                     | 110              |
| 56.0394.12.08                                                | Стол островной LG                         | Labgrade                     | 96               |
| 56.0394.12.02T                                               | Стол островной D кран tof                 | Durcon                       | 114              |
| 56.0394.12.12T                                               | Стол островной D с бортиком кран tof      | Durcon с бортиком            | 116              |
| <b>Столешницы островные 1500×1500×900 два комплекта воды</b> |                                           |                              |                  |
| 56.0394.22.03                                                | Стол островной KE                         | Керамика                     | 124              |
| 56.0394.22.08                                                | Стол островной LG                         | Labgrade                     | 112              |
| 56.0394.22.02T                                               | Стол островной D кран tof                 | Durcon                       | 128              |
| 56.0394.22.12T                                               | Стол островной D с бортиком кран tof      | Durcon с бортиком            | 131              |

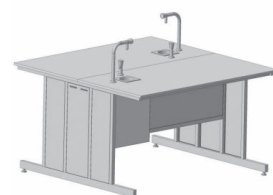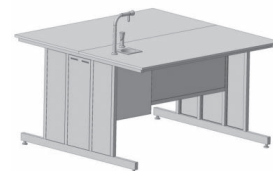

## ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ


Полки предназначены для увеличения рабочей поверхности столов островных и размещения на них дополнительного оборудования.

Дополнительно нижние полки могут быть укомплектованы комплектом электрики со светильником.



### Полки к столам островным

| КОД                                                         | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)               | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Полка нижняя для стола островного</b>                    |                                                         |                              |                  |
| 56.0390.11.14                                               | Полка нижняя 1200×360×460 J1C                           | Ламинат                      | 15               |
| 56.0390.11.08                                               | Полка нижняя 1200×360×460 LG                            | Labgrade                     | 21               |
| 56.0390.01.14                                               | Полка нижняя 1500×360×460 J1C                           | Ламинат                      | 16               |
| 56.0390.01.08                                               | Полка нижняя 1500×360×460 LG                            | Labgrade                     | 23               |
| <b>Полка двухуровневая для стола островного</b>             |                                                         |                              |                  |
| 56.0391.11.14                                               | Полка 2-х уровневая 1200×450×850 ЛС                     | Ламинат                      | 28               |
| 56.0391.11.08                                               | Полка 2-х уровневая 1200×450×850 LG                     | Labgrade                     | 36               |
| 56.0391.01.14                                               | Полка 2-х уровневая 1500×450×850 ЛС                     | Ламинат                      | 31               |
| 56.0391.01.08                                               | Полка 2-х уровневая 1500×450×850 LG                     | Labgrade                     | 47               |
| <b>Полка нижняя двойная для стола островного</b>            |                                                         |                              |                  |
| 56.0390.12.14                                               | Полка нижняя 2400×360×460 ЛС                            | Ламинат                      | 30               |
| 56.0390.12.08                                               | Полка нижняя 2400×360×460 LG                            | Labgrade                     | 42               |
| 56.0390.02.14                                               | Полка нижняя 3000×360×460 ЛС                            | Ламинат                      | 32               |
| 56.0390.02.08                                               | Полка нижняя 3000×360×460 LG                            | Labgrade                     | 46               |
| <b>Полка двухуровневая двойная для стола островного</b>     |                                                         |                              |                  |
| 56.0391.12.14                                               | Полка 2-х уровневая 2400×450×850 ЛС                     | Ламинат                      | 58               |
| 56.0391.12.08                                               | Полка 2-х уровневая 2400×450×850 LG                     | Labgrade                     | 72               |
| 56.0391.02.14                                               | Полка 2-х уровневая 3000×450×850 ЛС                     | Ламинат                      | 62               |
| 56.0391.02.08                                               | Полка 2-х уровневая 3000×450×850 LG                     | Labgrade                     | 94               |
| <b>Комплект электрики для нижней полки стола островного</b> |                                                         |                              |                  |
| BCO 001 -1200                                               | Автомат откл. питания, 4 эл. розетки                    |                              |                  |
| BCO 002-1200                                                | Автомат откл. питания, 4 эл. розетки, светильник 18 Вт. |                              |                  |
| BCO 001 -1500                                               | Автомат откл. питания, 4эл. розетки                     |                              |                  |
| BCO 002-1500                                                | Автомат откл. питания, 4 эл. розетки, светильник 18 Вт. |                              |                  |

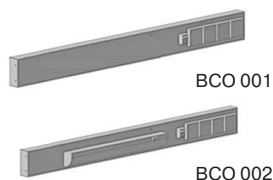

\* По специальному заказу полка может быть укомплектована комплектом электрики BCO 001 или BCO 002



## ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Тумбы предназначены для комплектации столов пристенных, островных, титровальной установки.



### Тумбы

| КОД                                                      | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)                        | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Тумба подвесная для столов пристенных и островных</b> |                                                                  |                              |                  |
| 56.0300.01.00-01                                         | Тумба подвесная 3 ящика, 400×530×380, верхний ящик с замком      |                              | 19               |
| 56.0315.01.00-01                                         | Тумба подвесная 4 ящика, 400×530×492, верхний ящик с замком      |                              | 23               |
| 56.0415.01.00-01                                         | Тумба подвесная дверь правая, 400×530×492, замок, 1 съемн. полка |                              | 17               |
| 56.0404.01.00-01                                         | Тумба подвесная дверь левая, 400×530×492, замок, 1 съемн. полка  |                              | 17               |
| <b>Тумба подкатная для столов пристенных и островных</b> |                                                                  |                              |                  |
| 56.0491.50.10-01                                         | Тумба подкатная 5 ящиков 460×530×640                             |                              | 34               |
| 56.0491.30.10-01                                         | Тумба подкатная 3 ящиков 460×530×640                             |                              | 31               |
| 56.0507.00.10-01                                         | Тумба подкатная 2 ящика 460×530×640                              |                              | 27               |
| 56.0491.00.10-01                                         | Тумба подкатная дверь правая 460×530×640                         |                              | 24               |
| 56.0491.10.10-01                                         | Тумба подкатная дверь левая 460×530×640                          |                              | 24               |
| <b>Тумба для столов пристенных и островных</b>           |                                                                  |                              |                  |
| 56.0519.11.04-01                                         | Тумба 610×450×1050 ЛБ                                            | Ламинат белый                | 32               |
| 56.0519.11.14-01                                         | Тумба 610×450×1050 ЛС                                            | Ламинат серый                | 32               |
| 56.0518.11.04-01                                         | Тумба 2 двери 910×450×1050 ЛБ                                    | Ламинат белый                | 42               |
| 56.0518.11.14-01                                         | Тумба 2 двери 910×450×1050 ЛС                                    | Ламинат серый                | 42               |
| 56.0548.11.04-01                                         | Тумба 2 двери 910×600×1050 ЛБ                                    | Ламинат белый                | 48               |
| 56.0548.11.14-01                                         | Тумба 2 двери 910×600×1050 ЛС                                    | Ламинат серый                | 48               |

## МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Мойки лабораторные предназначены для мытья лабораторной посуды, работы с водой и сливов отработанных реактивов в химических лабораториях.

Представляют собой прочную металлическую сварную конструкцию. Оборудованы нижними тумбами с распашными дверцами. Выполняются как в комплекте с сушилкой для посуды, так и без нее.



### Мойки

| КОД               | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)                  | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Мойки</b>      |                                                            |                              |                  |
| 56.0367.01.06-01  | Мойка одинарная 500×750×900 НС                             | Нерж. сталь 140 мм           | 31               |
| 56.0367.02.06-01  | Мойка одинарная с сушилкой 500×750×900 НС                  | Нерж. сталь 140 мм           | 36               |
| 56.0368.01.05-01  | Мойка одинарная 550×775×900 СП                             | Стеклопластик                | 36               |
| 56.0368.02.05-01  | Мойка одинарная с сушилкой 550×775×900 СП                  | Стеклопластик                | 41               |
| 56.0368.01.02-01Т | Мойка одинарная 550×775×900 D, смеситель tof               | Durcon                       | 51               |
| 56.0368.02.02-01Т | Мойка одинарная с сушилкой 550×775×900 D, смеситель tof    | Durcon                       | 56               |
| 56.0347.01.06-01  | Мойка двойная НС                                           | Нерж. сталь 140 мм           | 69               |
| 56.0347.02.06-01  | Мойка двойная НС с сушилкой слева                          | Нерж. сталь 140 мм           | 64               |
| 56.0347.03.06-01  | Мойка двойная НС с сушилкой справа                         | Нерж. сталь 140 мм           | 64               |
| 56.0347.04.06-01  | Мойка двойная НС с двумя сушилками                         | Нерж. сталь 140 мм           | 69               |
| 56.0347.01.05-01  | Мойка двойная СП                                           | Стеклопластик 280 мм         | 61               |
| 56.0347.02.05-01  | Мойка двойная СП с сушилкой слева                          | Стеклопластик 280 мм         | 66               |
| 56.0347.03.05-01  | Мойка двойная СП с сушилкой справа                         | Стеклопластик 280 мм         | 66               |
| 56.0347.04.05-01  | Мойка двойная СП с двумя сушилками                         | Стеклопластик 280 мм         | 71               |
| 56.0347.01.02-01Т | Мойка двойная D, смеситель tof                             | Durcon 280 мм                | 91               |
| 56.0347.02.02-01Т | Мойка двойная D с сушилкой слева, смеситель tof            | Durcon 280 мм                | 96               |
| 56.0347.03.02-01Т | Мойка двойная D с сушилкой справа, смеситель tof           | Durcon 280 мм                | 96               |
| 56.0347.04.02-01Т | Мойка двойная D с двумя сушилками, смеситель tof           | Durcon 280 мм                | 100              |
| 56.0250.01.05-01  | Мойка двойная торцевая СП с защитным стеклом               | Стеклопластик 280 мм         | 64               |
| 56.0250.02.05-01  | Мойка двойная торцевая СП с защитным стеклом, 2 смесителя  | Стеклопластик 280 мм         | 64               |
| 56.0250.01.02-01Т | Мойка двойная торцевая D с защитным стеклом, смеситель tof | Durcon 280 мм                | 98               |
| 56.0250.02.02-01Т | Мойка двойная торцевая D с защитным стеклом, смеситель tof | Durcon 280 мм                | 98               |
| 56.0402.01.06-01  | Сушилка навесная 500×150×550                               |                              | 5                |



## СТОЛЫ ДЛЯ ВЕСОВ, УСТАНОВКА ТИТРОВАЛЬНАЯ



**Столы для весов** предназначены для устранения воздействия вибрации и обеспечения воспроизводимости результатов взвешивания на аналитических и технических весах. Поверхностью стола для весов служит гранитная плита размерами 630×450 и толщиной 60 мм, установленная на четырех демпферах, закрепленных в ножках рамы. Стандартно столы выпускаются высотой 750 мм и 900 мм.

Столы для весов могут комплектоваться приставками. В этом случае основной весовой стол вставляется в стол приставку. Столы весовые в комплекте с приставками предназначены для увеличения рабочей площади и размещения дополнительного весового оборудования.

Столы устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости. Стол эксплуатируется автономно.

**Установка титровальная** предназначена для аналитических исследований методом титрования. Оснащена экраном с матовым стеклом, четырьмя люминесцентными лампами, пятью штативами с десятью лапками для крепления бюреток.

Дополнительно комплектуется подвесными тумбами различной модификации.

## Столы для весов, установка титровальная

| КОД                           | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)                  | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Столы для весов</b>        |                                                            |                              |                  |
| 56.0226.10.09-01              | Стол для весов малый 630×450×750 ГР                        | Гранит                       | 65               |
| 56.0226.13.09-01              | Стол для весов малый 630×450×900 ГР                        | Гранит                       | 69               |
| 56.0369.10.09-01              | Стол для весов малый с выдвижной полкой 630×450×750 ГР     | Гранит                       | 68               |
| 56.0369.13.09-01              | Стол для весов малый с выдвижной полкой 630×450×900 ГР     | Гранит                       | 72               |
| 56.0357.01.14                 | Приставка для весового стола 1200×750×750 ЛС               | Ламинат                      | 29               |
| 56.0357.01.08                 | Приставка для весового стола 1200×750×750 LG               | Labgrade                     | 32               |
| 56.0357.11.14                 | Приставка для весового стола 1200×750×750 ЛС тумба 3 ящика | Ламинат                      | 47               |
| 56.0357.11.08                 | Приставка для весового стола 1200×750×750 LG тумба 3 ящика | Labgrade                     | 51               |
| 56.0357.02.14                 | Приставка для весового стола 1200×750×900 ЛС               | Ламинат                      | 30               |
| 56.0357.02.08                 | Приставка для весового стола 1200×750×900 LG               | Labgrade                     | 33               |
| 56.0357.22.14                 | Приставка для весового стола 1200×750×900 ЛС тумба 4 ящика | Ламинат                      | 53               |
| 56.0357.22.08                 | Приставка для весового стола 1200×750×900 LG тумба 4 ящика | Labgrade                     | 56               |
| 56.0357.03.14                 | Приставка для весового стола 1500×750×750 ЛС               | Ламинат                      | 33               |
| 56.0357.03.08                 | Приставка для весового стола 1500×750×750 LG               | Labgrade                     | 40               |
| 56.0357.13.14                 | Приставка для весового стола 1500×750×750 ЛС тумба 3 ящика | Ламинат                      | 52               |
| 56.0357.13.08                 | Приставка для весового стола 1500×750×750 LG тумба 3 ящика | Labgrade                     | 59               |
| 56.0357.04.14                 | Приставка для весового стола 1500×750×900 ЛС               | Ламинат                      | 34               |
| 56.0357.04.08                 | Приставка для весового стола 1500×750×900 LG               | Labgrade                     | 41               |
| 56.0357.24.14                 | Приставка для весового стола 1500×750×900 ЛС тумба 4 ящика | Ламинат                      | 57               |
| 56.0357.24.08                 | Приставка для весового стола 1500×750×900 LG тумба 4 ящика | Labgrade                     | 64               |
| <b>Установка титровальная</b> |                                                            |                              |                  |
| 56.0395.01.03                 | Установка титровальная 1212×750×1910 КЕ                    | Керамика                     | 80               |

## ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Вытяжной шкаф используется для проведения работ по органическому синтезу с вредными химическими веществами, различными растворителями, нефтепродуктами, легко воспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами и щелочами.

Конструкция вытяжного шкафа представляет собой высокопрочный металлический корпус с эпоксиполиэфирным покрытием. Шкаф оборудован воздуховодом для вытяжки воздуха из рабочей зоны вытяжной камеры. На задней панели рабочей камеры расположены два вытяжных клапана с закрывающимися створками, которые позволяют регулировать воздушные потоки. Рабочая зона вытяжной камеры закрыта подъемным экраном из стекла «триплекс». Максимальная высота подъема экрана 640 мм.

Основание имеет три отсека с открывающимися дверями. Левый и центральный отсеки оснащены стационарной и выдвижной полкой, имеют индивидуальные каналы вытяжки, расположенные на задней стенке вытяжной камеры. Правый отсек предназначен для размещения и обслуживания сантехнических коммуникаций.

Освещение рабочей зоны осуществляется через остекленное окно люминесцентным светильником (2×18 Вт), расположенным в верхней части вытяжной камеры.

Шкафы вытяжные применяются при проведении работ по органическому синтезу и с вредными химическими веществами, растворителями, нефтепродуктами, легко воспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами, щелочами. Шкафы представляют собой прочную металлическую сварную конструкцию, покрытую эпоксиполиэфирной порошковой краской, подвергнутой высокотемпературной закалке, и состоят из двух частей: основания и камеры вытяжной, соединённых между собой винтами. Рабочая зона камеры вытяжной закрыта двумя экранами. Неподвижный экран и экран подъёмный из стекла триплекс, передвигающийся по направляющим. Максимальная высота подъёма экрана 640 мм. Вес экрана уравновешен с помощью двух грузов на тросах, расположенных в боковых стенках камеры вытяжной.

Освещение рабочей зоны осуществляется через остекленное окно электрическим светильником. У модификаций шкафа со взрывобезопасным светильником окно в крышке отсутствует, светильник располагается внутри камеры, а провод через штучер выводится наружу. На передней панели основания расположены выключатель освещения, три розетки, на которые подаётся напряжение электрической сети через выключатель автоматический с номинальным током 10 А. У шкафов, оснащённых взрывобезопасным светильником и выключателем (ВЗБ), на передней панели указанные элементы отсутствуют. У шкафов оснащённых мойками и подводом воды раковина оснащена сифоном с гибким адаптером для подключения к сливной канализации. Основание шкафов имеет три отсека с открывающимися дверями. Два отсека имеют по одной полке. На нижних полках отсеков имеются поддоны для хранения ёмкостей с жидкостями. Верхние полки в отсеках - съёмные. Левый и центральный отсеки имеют индивидуальные каналы вытяжки, расположенные на центральной задней стенке камеры вытяжной. Правый отсек предназначен для размещения и обслуживания сантехнических коммуникаций. Шкафы устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола, а также для выравнивания мебели в одной плоскости.





## ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ

### Шкафы вытяжные

| КОД                                                                  | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)                                 | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ    | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Шкаф вытяжной</b>                                                 |                                                                           |                                 |                  |
| 56.0423.00.03-01                                                     | Шкаф вытяжной 1200×900×2300 KE                                            | Керамика                        | 350              |
| 56.0423.01.08-01                                                     | Шкаф вытяжной 1200×900×2300 LG                                            | Labgrade                        | 350              |
| 56.0423.02.06-01                                                     | Шкаф вытяжной 1200×900×2300 HC                                            | Нерж. сталь                     | 345              |
| 56.0423.20.02-01                                                     | Шкаф вытяжной 1200×900×2300 D                                             | Durcon                          | 355              |
| 56.0425.00.03-01                                                     | Шкаф вытяжной 1500×900×2300 KE                                            | Керамика                        | 370              |
| 56.0425.01.08-01                                                     | Шкаф вытяжной 1500×900×2300 LG                                            | Labgrade                        | 370              |
| 56.0425.02.06-01                                                     | Шкаф вытяжной 1500×900×2300 HC                                            | Нерж. сталь                     | 365              |
| 56.0425.20.02-01                                                     | Шкаф вытяжной 1500×900×2300 D                                             | Durcon                          | 375              |
| <b>Шкаф вытяжной с подводом воды</b>                                 |                                                                           |                                 |                  |
| 56.0423.03.03-01                                                     | Шкаф вытяжной с подводом воды 1200×900×2300 KE                            | Керамика                        | 350              |
| 56.0423.04.08-01                                                     | Шкаф вытяжной с подводом воды 1200×900×2300 LG                            | Labgrade                        | 350              |
| 56.0423.05.06-01                                                     | Шкаф вытяжной с подводом воды 1200×900×2300 HC                            | Нерж. сталь                     | 345              |
| 56.0423.21.02-01T                                                    | Шкаф вытяжной с подводом воды 1200×900×2300 D кран tof                    | Durcon                          | 355              |
| 56.0425.03.03-01                                                     | Шкаф вытяжной с подводом воды 1500×900×2300 KE                            | Керамика                        | 370              |
| 56.0425.04.08-01                                                     | Шкаф вытяжной с подводом воды 1500×900×2300 LG                            | Labgrade                        | 370              |
| 56.0425.05.06-01                                                     | Шкаф вытяжной с подводом воды 1500×900×2300 HC                            | Нерж. сталь                     | 365              |
| 56.0425.21.02-01T                                                    | Шкаф вытяжной с подводом воды 1500×900×2300 D кран tof                    | Durcon                          | 375              |
| <b>Шкаф вытяжной с взрывобезопасной лампой</b>                       |                                                                           |                                 |                  |
| 56.0423B.09.03-01                                                    | Шкаф вытяжной с ВЗБ 1200×900×2300 KE                                      | Керамика                        | 350              |
| 56.0423B.10.08-01                                                    | Шкаф вытяжной с ВЗБ 1200×900×2300 LG                                      | Labgrade                        | 350              |
| 56.0423B.11.06-01                                                    | Шкаф вытяжной с ВЗБ 1200×900×2300 HC                                      | Нерж. сталь                     | 345              |
| 56.0423B.23.02-01                                                    | Шкаф вытяжной с ВЗБ 1200×900×2300 D                                       | Durcon                          | 355              |
| 56.0425B.09.03-01                                                    | Шкаф вытяжной с ВЗБ 1500×900×2300 KE                                      | Керамика                        | 370              |
| 56.0425B.10.08-01                                                    | Шкаф вытяжной с ВЗБ 1500×900×2300 LG                                      | Labgrade                        | 370              |
| 56.0425B.11.06-01                                                    | Шкаф вытяжной с ВЗБ 1500×900×2300 HC                                      | Нерж. сталь                     | 365              |
| 56.0425B.23.02-01                                                    | Шкаф вытяжной с ВЗБ 1500×900×2300 D                                       | Durcon                          | 375              |
| <b>Шкаф вытяжной с подводом воды с взрывобезопасной лампой</b>       |                                                                           |                                 |                  |
| 56.0423B.12.03-01                                                    | Шкаф вытяжной с подводом воды с ВЗБ 1200×900×2300 KE                      | Керамика                        | 350              |
| 56.0423B.13.08-01                                                    | Шкаф вытяжной с подводом воды с ВЗБ 1200×900×2300 LG                      | Labgrade                        | 350              |
| 56.0423B.14.06-01                                                    | Шкаф вытяжной с подводом воды с ВЗБ 1200×900×2300 HC                      | Нерж. сталь                     | 345              |
| 56.0423B.24.02-01T                                                   | Шкаф вытяжной с подводом воды с ВЗБ 1200×900×2300 D кран tof              | Durcon                          | 355              |
| 56.0425B.12.03-01                                                    | Шкаф вытяжной с подводом воды с ВЗБ 1500×900×2300 KE                      | Керамика                        | 370              |
| 56.0425B.13.08-01                                                    | Шкаф вытяжной с подводом воды с ВЗБ 1500×900×2300 LG                      | Labgrade                        | 370              |
| 56.0425B.14.06-01                                                    | Шкаф вытяжной с подводом воды с ВЗБ 1500×900×2300 HC                      | Нерж. сталь                     | 365              |
| 56.0425B.24.02-01 T                                                  | Шкаф вытяжной с подводом воды с ВЗБ 1500×900×2300 D кран tof              | Durcon                          | 375              |
| <b>Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем</b>                           |                                                                           |                                 |                  |
| 56.0423.19.06-01                                                     | Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем 1200×900×2300 HC мойка HC             | Нерж. сталь, нерж. сталь 140 мм | 350              |
| 56.0423.28.08-01                                                     | Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем 1200×900×2300 LG мойка HC             | Labgrade, нерж. сталь 140 мм    | 350              |
| 56.0423.30.08-01                                                     | Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем 1200×900×2300 LG мойка СП             | Labgrade, стеклопластик 280 мм  | 345              |
| 56.0423.27.02-01T                                                    | Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем 1200×900×2300 D мойка D смеситель tof | Durcon, Durcon 280 мм           | 355              |
| 56.0425.19.06-01                                                     | Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем 1500×900×2300 HC мойка HC             | Нерж. сталь, нерж. сталь 140 мм | 370              |
| 56.0425.28.08-01                                                     | Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем 1500×900×2300 LG мойка HC             | Labgrade, нерж. сталь 140 мм    | 370              |
| 56.0425.30.08-01                                                     | Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем 1500×900×2300 LG мойка СП             | labgrade, стеклопластик 280 мм  | 365              |
| 56.0425.27.02-01T                                                    | Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем 1500×900×2300 D мойка D смеситель tof | Durcon, Durcon 280 мм           | 375              |
| <b>Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем с взрывобезопасной лампой</b> |                                                                           |                                 |                  |
| 56.0423B.18.06-01                                                    | Шкаф вытяжной 1200×900×2300 HC мойка HC                                   | Нерж. сталь, нерж. сталь 140 мм | 345              |
| 56.0423B.29.08-01                                                    | Шкаф вытяжной 1200×900×2300 LG мойка HC                                   | Labgrade, нерж. сталь 140 мм    | 350              |
| 56.0423B.31.08-01                                                    | Шкаф вытяжной 1200×900×2300 LG мойка СП                                   | Labgrade, стеклопластик 280 мм  | 350              |
| 56.0423B.26.02-01T                                                   | Шкаф вытяжной 1200×900×2300 D мойка D смеситель tof                       | Durcon, Durcon 280 мм           | 355              |
| 56.0425B.18.06-01                                                    | Шкаф вытяжной 1500×900×2300 HC мойка HC                                   | Нерж. сталь, нерж. паль 140 мм  | 365              |
| 56.0425B.29.08-01                                                    | Шкаф вытяжной 1500×900×2300 LG мойка HC                                   | Labgrade, нерж. паль 140 мм     | 370              |
| 56.0425B.31.08-01                                                    | Шкаф вытяжной 1500×900×2300 LG мойка СП                                   | Labgrade, стеклопластик 280 мм  | 370              |
| 56.0425B.26.02-01T                                                   | Шкаф вытяжной 1500×900×2300 D мойка D смеситель tof                       | Durcon, Durcon 280 мм           | 375              |
| 56.0096.10.00-01                                                     | Зонт вытяжной 550×700×500                                                 |                                 | 7                |
| <b>Шкаф для нагревательных печей</b>                                 |                                                                           |                                 |                  |
| 56.0525.11.03-01                                                     | Шкаф для нагревательных печей 970×920×1950 KE                             | Керамика                        | 85               |
| 56.0553.11.03                                                        | Шкаф для нагревательных печей 1210×850×1960 KE                            | Керамика                        | 90               |



## ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ

### Шкафы вытяжные со светильниками



| КОД                                    | НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)                                                               | МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Шкафы вытяжные со светильниками</b> |                                                                                                         |                              |                  |
| 56.0427.00.03-01                       | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 два светильника КЕ                                                          | Керамика                     | 410              |
| 56.0427.01.08-01                       | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 два светильника LG                                                          | Labgrade                     | 410              |
| 56.0427.02.06-01                       | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 два светильника НС                                                          | Нерж. сталь                  | 405              |
| 56.0427.03.03-01                       | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 два светильника, 2 комплекта воды КЕ                                        | Керамика                     | 410              |
| 56.0427.04.08-01                       | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 два светильника, 2 комплекта воды LG                                        | Labgrade                     | 410              |
| 56.0427.05.06-01                       | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 два светильника, 2 комплекта воды НС                                        | Нерж. сталь                  | 405              |
| 56.0427В.09.03-01                      | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 один взрывобезопасный светильник КЕ                                         | Керамика                     | 410              |
| 56.0427В.10.08-01                      | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 один взрывобезопасный светильник LG                                         | Labgrade                     | 410              |
| 56.0427В.11.06-01                      | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 один взрывобезопасный светильник НС                                         | Нерж. сталь                  | 405              |
| 56.0427В.12.03-01                      | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 один взрывобезопасный светильник, 2 комплекта воды КЕ                       | Керамика                     | 410              |
| 56.0427В.13.08-01                      | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 один взрывобезопасный светильник, 2 комплекта воды LG                       | Labgrade                     | 410              |
| 56.0427В.14.06-01                      | Шкаф вытяжной 2000×900×2300 один взрывобезопасный светильник, 2 комплекта воды НС                       | Нерж. сталь                  | 405              |
| <b>Шкафы вытяжные со светильниками</b> |                                                                                                         |                              |                  |
| 56.0450.00.03-01                       | Шкафы вытяжной без подвода воды с монолитной камерой из стеклопластика 1500×910×2300 КЕ                 | Керамика                     | 350              |
| 56.0450.01.08-01                       | Шкафы вытяжной без подвода воды с монолитной камерой из стеклопластика 1500×910×2300 LG                 | Labgrade                     | 350              |
| 56.0450.03.03-01                       | Шкафы вытяжной с подводом воды с монолитной камерой из стеклопластика 1500×910×2300 КЕ                  | Керамика                     | 350              |
| 56.0450.04.08-01                       | Шкафы вытяжной с подводом воды с монолитной камерой из стеклопластика 1500×910×2300 LG                  | Labgrade                     | 350              |
| 56.0450.09.03-01                       | Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ электрикой с монолитной камерой из стеклопластика 1500×910×2300 КЕ | Керамика                     | 350              |
| 56.0450.10.08-01                       | Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ электрикой с монолитной камерой из стеклопластика 1500×910×2300 LG | Labgrade                     | 350              |
| 56.0450.12.03-01                       | Шкаф вытяжной с подводом воды с ВЗБ электрикой с монолитной камерой из стеклопластика 1500×910×2300 КЕ  | Керамика                     | 350              |
| 56.0450.13.08-01                       | Шкаф вытяжной с подводом воды с ВЗБ электрикой с монолитной камерой из стеклопластика 1500×910×2300 LG  | Labgrade                     | 350              |
| 56.0450.11.03-01                       | Шкаф вытяжной с нагревательной плитой с монолитной камерой из стеклопластика 1500×910×2300 КЕ           | Керамика                     | 350              |

Шкаф предназначен для организации двух рабочих мест.

Вытяжной шкаф представляет собой сборную металлическую конструкцию, выполненную из листовой стали и трубы квадратного сечения. Металлические элементы окрашены порошковым методом, эпоксиполиэфирной краской светло-серого цвета RAL-7035.

Рабочая камера шкафа выполнена из стеклопластика, особо устойчива к агрессивным веществам, концентрированным кислотам и высоким температурам, поставляется в трех исполнениях в зависимости от решаемых задач.

Подъемный защитный экран, выполненный из закаленного стекла «триплекс», обеспечивает доступ в рабочую зону, максимальная высота подъема экрана 580 мм. Освещение осуществляется люминесцентным светильником (2×18 Вт) или взрывобезопасным светильником, расположенным в верхней части рабочей камеры.

Шкаф оборудован воздухопроводом для вытяжки воздуха из рабочей камеры диаметром 200 мм.

В вытяжном шкафу предусмотрена возможность комплектования: рабочими поверхностями из керамики и эпоксидного композита, нагревательной платформой, подводом воды и газа, раковиной.

Нижняя тумба вытяжного шкафа имеет три отсека с открывающимися дверями. Левый и центральный отсеки оснащены стационарной и выдвижной полкой, имеют индивидуальные каналы вытяжки, расположенные на задней стенке тумбы. Правый отсек предназначен для размещения и обслуживания сантехнических коммуникаций. На передней панели нижней тумбы расположены выключатель освещения, три брызгозащитных розетки 220 В, выключатель автоматический с номинальным током 10 А, при комплектации вытяжного шкафа нагревательной платформой на передней панели располагается блок управления платформой.

Для компенсации неровностей пола вытяжной шкаф устанавливается на регулируемые опоры.

Габариты: высота 2300 мм, длина 1500 мм, ширина 910 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

сайт: <http://ekros.nt-rt.ru> || эл. почта: [emc@nt-rt.ru](mailto:emc@nt-rt.ru)